


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY MASSAGE CỔ



MODEL DVMG-00001

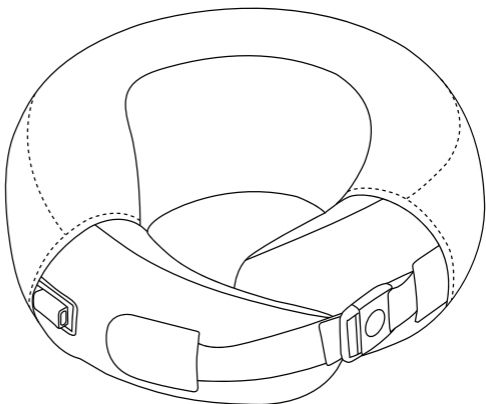

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của **daiviet**



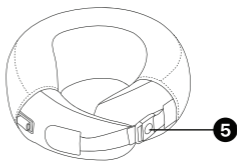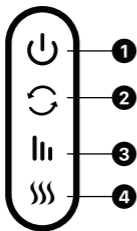

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để vận hành đúng cách.
- Vui lòng giữ lại sách để tham khảo khi cần.

CHI TIẾT SẢN PHẨM



- 1** Nút nguồn **2** Chuyển đổi **3** Tăng giảm tốc độ
4 Nhiệt **5** Dây đai và nút cố định

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


- Nhấn giữ 3 giây nút "  " để mở hoặc tắt máy.
- Máy sẽ hoạt động ở chế độ tự động và tắt máy sau 15 phút.
- Nhấn nút "  ", massage sẽ đảo chiều ngược lại.
- Nhấn nút "  " để điều chỉnh tốc độ di chuyển con lăn. Có 3 cường độ nhanh, vừa và chậm.
- Chế độ nhiệt tự động khởi động khi mở máy, bấm nút "  " để tắt hoặc mở lại theo nhu cầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Sử dụng nguồn điện tương thích với điện áp của sản phẩm.
- Không sử dụng các linh kiện không rõ nguồn gốc thay thế linh kiện của sản phẩm.
- Không sạc sản phẩm khi điện áp không ổn định.
- Không chạm vào nguồn điện hoặc phích cắm bằng tay ướt để tránh hỏng máy hay giật điện.
- Trẻ em, người tàn tật, người cao tuổi, người không đủ thể chất, người mất cảm giác hoặc người khuyết tật về tinh thần cần được sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Sản phẩm có pin, không được tháo rời, tác động trực tiếp, bóp pin bên trong, không sử dụng ở môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, không đưa sản phẩm lại gần lửa.
- Phải tắt nguồn sản phẩm khi cần tháo pin.
- Không sử dụng sản phẩm khi máy bị hư hỏng hoặc ẩm ướt.
- Sản phẩm này là sản phẩm xoa bóp cá nhân và không thể thay thế thuốc chữa bệnh hay thiết bị y tế.
- Sản phẩm này có chức năng nhiệt, vì vậy những người nhạy cảm với nhiệt phải chú ý khi sử dụng.
- Khi máy massage cổ đang hoạt động không được tác động lực nào đè lên sản phẩm làm hư hỏng con lăn massage, và hư hỏng motor massage.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Model	DVMG - 00001
Công suất	6 W
Điện áp	3.7 V
Pin	2500 mAh

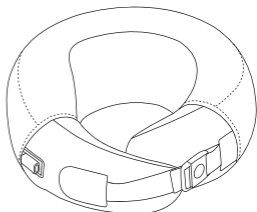

CHI TIẾT ĐÓNG GÓI



Máy massage cổ

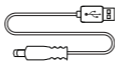

Dây cáp USB



Hướng dẫn sử dụng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Xoa bóp thông minh
- Đảo chiều massage
- Massage nhiệt
- Chế độ hẹn giờ tự động tắt sau 15 phút
- Tăng giảm tốc độ massage theo nhu cầu
- Sạc pin dễ dàng

BẢO QUẢN

- Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, không để sản phẩm nơi ẩm ướt.
- Không để sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao trong thời gian dài.
- Trong điều kiện bình thường tuổi thọ của pin là 2500 lần sạc và xả.
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài tuổi thọ của pin sẽ bị rút ngắn, nên sạc ít nhất 1 đến 2 lần 1 tháng.
- Pin được sạc đầy sẽ hoạt động trong khoảng 1.5 giờ, thời gian sạc đầy là 4 giờ. Khi pin quá yếu, máy sẽ không hoạt động bình thường, cần được sạc pin ít nhất 5 phút trước khi sử dụng.

GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

STT	VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
1	Tự động tắt nguồn	Nguồn pin thấp	Vui lòng sạc pin
2	Không bật được nguồn	Nguồn pin bị hết	Vui lòng sạc pin
3	Không sạc được	Đèn chỉ báo không sáng, ổ cắm USB không kết nối tốt	Vui lòng rút dây cáp USB để cắm lại và chắc chắn cổng USB được kết nối tốt
4	Cường độ massage quá yếu, máy hoạt động không bình thường	Pin thiếu hụt	Sạc pin