

daviet

THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY MASSAGE CỔ

MODEL DVMG-00003




Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của daiviet

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để vận hành đúng cách.
- Vui lòng giữ lại sách để tham khảo khi cần.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Không mang nữ trang, phụ kiện khi sử dụng.
- Không sử dụng cùng với các dụng cụ điện tử y tế khác, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, hay các dụng cụ điện tử y tế duy trì sự sống khác, điện tâm đồ...
- Không nên đeo sản phẩm trước ngực.
- Những người cao tuổi, những người có bệnh nặng, phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Không sử dụng khi bạn đang ngủ hoặc đang tắm.
- Không dùng cho trẻ em hoặc người không có khả năng biểu đạt ý thức.
- Không được tự ý tháo rời sản phẩm, không để sản phẩm tiếp xúc với nước để tránh hư hỏng. Không rửa sản phẩm bằng nước, không sử dụng sau khi pin bị ngâm trong nước.
- Sản phẩm này là sản phẩm xoa bóp cá nhân và không thể thay thế thuốc chữa bệnh hay thiết bị y tế.
- Sản phẩm này chỉ có thể được sử dụng bởi một người, không sử dụng đồng thời từ hai người trở lên.
- Vui lòng sử dụng thiết bị sạc được kèm theo với sản phẩm này để sạc và chú ý đến an toàn khi cắm sạc.
- Không làm hỏng, bẻ cong, kéo, xoắn hoặc buộc dây nguồn quá chặt.
- Không để sản phẩm này tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc nước nóng.
- Không được vứt bỏ sản phẩm này cùng với rác thải sinh hoạt. Khi bạn quyết định vứt bỏ sản phẩm này, vui lòng tuân theo luật môi trường địa phương và hướng dẫn xử lý rác thải.
- Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.


CHI TIẾT ĐÓNG GÓI

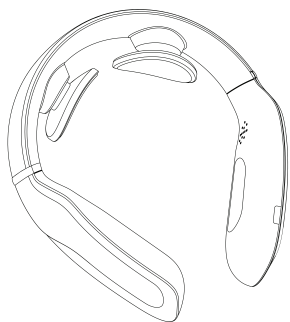

Máy massage cổ

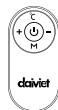

Điều khiển cầm tay

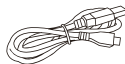


Dây cáp USB




Hướng dẫn sử dụng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

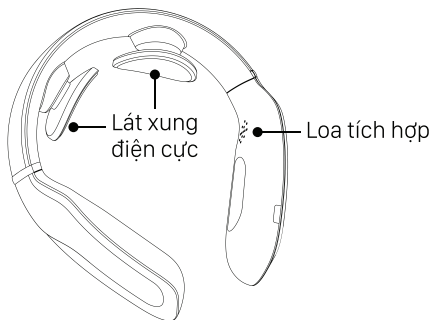

Model	DVMG-00003
Công suất	4 W
Điện áp	5 V
Pin	1500 mAh
Chất liệu	Nhựa ABS

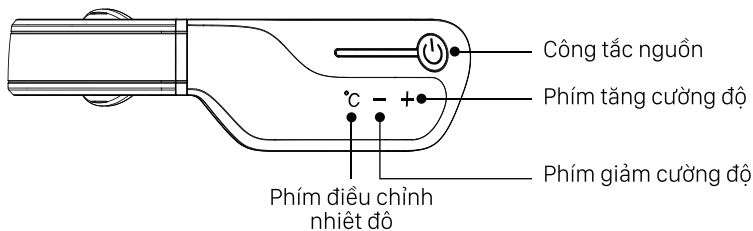

CÔNG TẮC NGUỒN

- ▶ Nhấn và giữ để mở máy và đèn sẽ sáng lên, giọng nói thiết bị sẽ phản hồi: " Đại Việt chào bạn ".
- ▶ Nhấn và giữ để tắt máy và đèn báo sẽ tắt, giọng nói thiết bị sẽ phản hồi " Tắt máy ".
- ▶ Nhấn để chọn chế độ: Có tất cả 5 chế độ để cho bạn lựa chọn.
 - Chế độ thông minh
 - Chế độ nhịp điệu
 - Chế độ dịu nhẹ
 - Chế độ thư giãn
 - Chế độ vận động



PHÍM GIẢM CƯỜNG ĐỘ

- ▶ Ở bất kỳ chế độ nào, nhấn phím này để giảm cường độ và đèn sẽ luôn sáng.
- ▶ Giọng nói thiết bị sẽ phản hồi: " Cường độ 1 ... Cường độ 15 ".
- ▶ Khi cường độ của thiết bị là 1, nếu vẫn tiếp tục nhấn " — ", cường độ vẫn là 1. Thiết bị sẽ phản hồi giọng nói: " Cường độ nhẹ nhất ".



PHÍM TĂNG CƯỜNG ĐỘ

- ▶ Ở bất kỳ chế độ nào, nhấn phím này để tăng cường độ và đèn sẽ luôn sáng.
- ▶ Giọng nói thiết bị sẽ phản hồi: " Cường độ 1 ... Cường độ 15 ".
- ▶ Khi cường độ của thiết bị là 15, nếu vẫn tiếp tục nhấn " + ", Cường độ vẫn là 15. Thiết bị sẽ phản hồi giọng nói: " Cường độ mạnh nhất ".




PHÍM ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Theo mặc định, nhiệt độ ban đầu thấp. Vui lòng chạm vào phím điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh cường độ sưởi ấm, vòng lặp sẽ chuyển mạch liên tục, với giọng nói phản hồi tương ứng là:

- Giảm nhiệt độ: Đèn sáng đổi màu với tốc độ chậm.
 - Tăng nhiệt độ: Đèn sáng đổi màu với tốc độ nhanh.
 - Tắt nhiệt: Đèn sáng đổi màu với tốc độ vừa phải.
- **Lưu ý:** Khi pin yếu, thiết bị sẽ dừng mọi hoạt động và điều khiển, tự động tắt máy, tắt tất cả đèn, phát giọng nói: " Pin yếu, hãy cắm sạc ". Thiết bị sẽ tự động tắt sau ba lần phát giọng nói phản hồi.


Điều khiển cầm tay

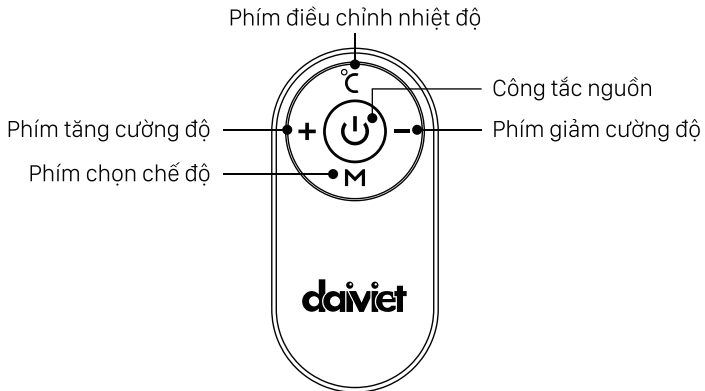

- Chức năng các phím tương ứng ở điều khiển cầm tay sẽ tương tự với chức năng các phím điều khiển mặc định trên thiết bị massage cổ thông minh. Với thiết kế nhỏ gọn, điều khiển cầm tay này sẽ mang lại sự tiện dụng cho người dùng với một phong cách sang trọng, đẳng cấp và khác biệt với các loại máy massage cổ trên thị trường.


- **Cách tháo và lắp pin cho điều khiển cầm tay:**

Sử dụng tua vít có rãnh cắm vào khe ở mặt sau của điều khiển cầm tay và xoay nó sang trái để mở nắp. Sau đó, chạm nhẹ vào mặt sau của điều khiển cầm tay để tháo ra và tiến hành thay thế pin mới. Sau khi thay pin, đặt lại nắp bảo vệ và xoay nó sang phải để đóng lại.

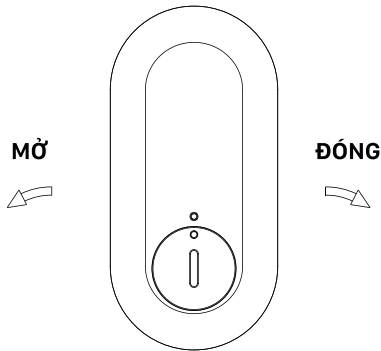

Hướng dẫn sạc thiết bị

- Kết nối nguồn điện với đầu cáp USB, sau đó cắm đầu sạc Type-C vào ổ cắm sạc của thiết bị.
- Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
- Đèn thiết bị sẽ sáng nhấp nháy trong khi sạc.
- Mất khoảng 3 - 5 giờ để sạc đầy pin. Trong quá trình sạc đèn sẽ có màu đỏ, sau khi sạc đầy sẽ có đèn màu xanh sáng liên tục không nhấp nháy.
- **Lưu ý:** Sản phẩm sẽ không hoạt động trong quá trình sạc. Không kéo, bóp dây điện để tránh hư hỏng.

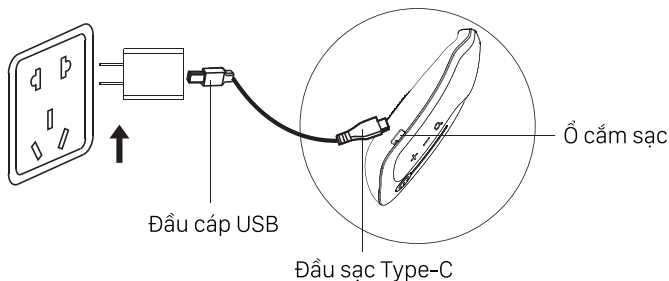

Vệ sinh

- Vui lòng tắt nguồn trước khi vệ sinh. Vui lòng lau bằng vải mềm khô. Nếu sản phẩm đặc biệt bẩn, hãy sử dụng bông hoặc vải cotton ngâm trong cồn để lau.
- Không rửa sản phẩm này bằng nước hoặc chất lỏng ăn mòn.

Bảo trì

- Vui lòng đặt nó ở nơi an toàn và cho vào hộp đóng gói.
- Vui lòng không đặt vật nặng lên trên sản phẩm. Chú ý các biện pháp chống ẩm, chống động vật gặm nhấm, chống bắn.
- Nếu thiết bị được lưu trữ trong hơn ba tháng, nên được kiểm tra và sạc lại trước khi sử dụng.
- Không đặt gần sàn nhà, tường hoặc mái nhà. Điều kiện bảo quản phải tốt, thoáng gió, tránh ánh nắng gay gắt chiếu vào và khí gas ăn mòn.

Hướng dẫn kết nối Bluetooth

- ▶ **Bước 1:** Vào mục Bluetooth trên điện thoại tìm tên DVMG-00003 và bấm kết nối.
- ▶ **Bước 2:** Mở nhạc trên điện thoại.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Không thể khởi động	Thiết bị đang sạc	Sử dụng sau khi sạc
	Dung lượng pin bên trong sắp hết	Vui lòng cắm sạc
Không thể cắm sạc	Bộ chuyển đổi nguồn không được cắm đúng cách	Kiểm tra và cắm lại
Sản phẩm có vẻ bình thường, nhưng không có phản ứng hoặc cảm giác hoạt động	Điện cực không tiếp xúc trực tiếp với da	Để mặt điện cực trên máy massage tiếp xúc trực tiếp với da
	Nơi các điện cực tiếp xúc với da là tóc, quần áo hoặc phụ kiện	Cởi bỏ phụ kiện, trang sức hoặc tách ra khỏi khu vực tiếp xúc điện cực
Ngứa ran, kích ứng	Máy massage không được gắn chặt vào cổ	Vệ sinh sạch cổ bằng khăn mềm và điều chỉnh phần massage sát vào cổ
	Massage quá lâu	Thời gian thích hợp là từ 10 - 20 phút
	Massage quá mạnh	Giảm cường độ phù hợp
	Khí hậu lạnh và da khô	Dùng khăn mềm ẩm lau bề mặt da và điện cực